

Phonak Audéo™ Marvel



Liefde op het eerste geluid.

Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Met Phonak Audéo Marvel introduceren we multifunctionele hoortoestellen die een 'liefde op het eerste geluid'-ervaring bieden

Liefde op het eerste geluid ... elke dag opnieuw!

Wanneer we het hebben over liefde op het eerste geluid, bedoelen we niet alleen de eerste keer dat uw cliënten Phonak Audéo Marvel uitproberen, maar elke keer dat ze de hoortoestellen dragen. Vanaf het moment dat u voor het eerst Marvel-hoortoestellen aanpast, kunnen ze een **ongeëvenaarde geluidskwaliteit verwachten**.

Deze nieuwe generatie Phonak-technologie herkent en past zich automatisch aan om precies aan te sluiten bij meer luistersituaties dan ooit tevoren.¹ Met AutoSense OS™ 3.0 en Binaural VoiceStream Technology™ in alle modellen kunnen uw cliënten genieten van beter spraakverstaan in lawaai en minder luisterinspanningen in het dagelijks leven.

Belangrijkste kenmerken:

- Uitmuntende geluidskwaliteit vanaf de eerste aanpassing ²
- Betere spraakverstaanbaarheid in rumoer ³
- Minder luisterinspanning in rumoer ⁴
- Hoogste kwaliteit geluidsstreaming ⁵

De kracht van oplaadbare technologie






Phonak loopt voorop op het gebied van oplaadbaarheid binnen de hoorsector met de introductie van oplaadbare lithium-ion-accu's. Er zijn ook Marvel-hoortoestellen met deze technologie, waardoor ze snel kunnen worden opgeladen en lang mee gaan. Ze gaan automatisch aan wanneer ze uit de oplader worden verwijderd en gaan uit wanneer ze worden teruggeplaatst in de oplader. Uw cliënten kunnen de hele dag door onbeperkt genieten van horen en streamen.

Belangrijkste kenmerken:

- Gebruiksgemak: geen gedoe meer met wegwerpbare batterijen
- Volledige dag horen, inclusief streamen
- Supersnel laden
- Accu is ontworpen om 6 jaar mee te gaan



Productbeschrijving

						
		Audéo M-312 Audéo M-312 Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-312T Audéo M-312T Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-13T Audéo M-13T Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-R Audéo M-R Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-RT Audéo M-RT Trial M90/M70/M50/M30
Accutype		312	312	13		
Multi-function button		•	•	•	•	•
Luisterspoel			•	•		•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Nano-coating		•	•	•	•	•
IP-certificering		IP68 ⁶	IP68 ⁶	IP68 ⁶	IP68 ⁶	IP68 ⁶
Afmetingen	L x B x D	26,8 x 11,2 x 7,1 mm	29,1 x 11,9 x 7,2 mm	29,0 x 11,9 x 8,1 mm	28,0 x 11,9 x 8,0 mm	30,5 x 12,5 x 8,0 mm
	Gewicht	1,1 g	1,3 g	1,4 g	2,1 g	2,3 g
Oplaadtijd ⁷	0% tot 100%				3 uur	3 uur
	0% tot 80%				1,5 uur	1,5 uur
	30 min. aanpassing				10 min.	10 min.
S Receiver						
Max. uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	111	111	111	111	111
Max. gain (dB)	2 cc coupler	46	46	46	46	46
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000
Stroomverbruik (mA)		2,2	2,2	2,2		
M Receiver						
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	114	114	114	114	114
Max. gain (dB)	2 cc coupler	50	50	50	50	50
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000
Stroomverbruik (mA)		2,1	2,1	2,1		
P Receiver						
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	122	122	122	122	122
Max. gain (dB)	2 cc coupler	58	58	58	58	58
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 6300	< 100 - 6300	< 100 - 6300	< 100 - 6300	< 100 - 6300
Stroomverbruik (mA)		2,2	2,2	2,2		
UP Receiver						
Max. uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	130	130	130	130	130
Max. gain (dB)	2 cc coupler	67	67	67	67	67
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 6000	< 100 - 6000	< 100 - 6000	< 100 - 6000	< 100 - 6000
Stroomverbruik (mA)		2,1	2,1	2,1		

Kleuren behuizing

Huid & haar



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



T7
Alpine White



HO
Beige

Traditioneel

⁶ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529. Er waren geen sporen van stof zichtbaar in de behuizing.

⁷ De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de accu, maar is maximaal 3 uur.

Prestatieniveaus

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS™ 3.0	Premium	Advanced	Standard	Essential
Rustige situatie	•	•	•	•
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	
Muziek	•	•		
Spraak in veel lawaai ³	•			
Spraak in de auto	•			
Comfort in echo	•			
Gestreamde spraak	•	•	•	•
Gestreamde muziek	•	•	•	•
Handmatige programma's				
Max. aantal handmatige programma's	3	3	3	3
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
Roger + mic	•	•	•	•
Telefoon + mic	•	•	•	•

Funcities	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
SNR-boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Kanalen voor fijnafstelling	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•

Aanpassing

	Audéo M-312 Audéo M-312 Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-312T Audéo M-312T Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-13T Audéo M-13T Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-R Audéo M-R Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-RT Audéo M-RT Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.0 of hoger	6.0.1 of hoger	6.0.1 of hoger	6.0 of hoger	6.0.1 of hoger
Noahlink Wireless	•	•	•	•	•
NOAHLink		•	•		
HI-PRO, HI-PRO2		•	•		

1 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 17 oktober 2018.

2 Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 17 oktober 2018.

3 Field Study News over Phonak StereoZoom wordt op dit moment voorbereid, eind 2018 beschikbaar via www.phonakpro.com/evidence

4 Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 17 oktober 2018.

5 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 17 oktober 2018.

Akoestische koppeling

	S Receiver	M Receiver	P receiver	UP Receiver
Lengte				
Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) links en rechts	•	•	•	•
Eartip				
Cap-eartip	•	•	•	
Open eartip verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•	•	
Venting-eartip verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•	•	
Power-eartip verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Hard	•	•	•	
Silicone	•	•	•	
Titanium	•	•	•	
cShell				
Hard	•	•	•	•

*Verkrijgbaar met extra kanaallengteoptie

Mild tot matig-ernstig gehoorverlies.

Mild tot ernstig gehoorverlies.

Mild tot ernstig gehoorverlies.

Matig tot zeer ernstig gehoorverlies.

Phonak Audéo M Trial™

De nieuwe Phonak Audéo M Trial-hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw aanbevelingen. De verschillende niveaus in technologie die beschikbaar zijn in één Phonak Audéo M Trial-hoortoestel bieden u een scala aan opties om al bij de eerste afspraak de juiste hooroplossing aan te bieden of te verbeteren tijdens reparaties.

Opladopties voor Phonak Audéo M-R



Phonak Charger Case Combi

De Phonak Charger Case Combi is een oplader, droogkit en beschermend doosje in één. Daarnaast bevat hij een reinigingstool in een robuuste, vochtbestendige behuizing.



Phonak Power Pack

Om onderweg oplaadbare hoortoestellen op te laden, kan de Phonak Power Pack eenvoudig worden bevestigd aan de onderzijde van de Phonak Charger Case Combi.



Phonak Mini Charger Case

De Phonak Mini Charger Case, met standaard USB-C-oplaadaansluiting, is een compacte oplader voor twee Audéo M-R- of Audéo M-RT-hoortoestellen.

Phonak Audéo M Bluetooth®-versies

Rechtstreekse telefoongesprekken/
audiostreaming

Draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons.

Het Bluetooth®-merk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Draadloze Communicatie Portfolio

	Audéo M-312 Audéo M-312 Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-312T Audéo M-312T Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-13T Audéo M-13T Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-R Audéo M-R Trial M90/M70/M50/M30	Audéo M-RT Audéo M-RT Trial M90/M70/M50/M30
Draadloos accessoire					
TV Connector	•	•	•	•	•
Roger					
RogerDirect™	•	•	•	•	•
Apps					
myPhonak	•	•	•	•	•
Phonak Remote	•	•	•	•	•

Ga naar www.phonakpro.com/audeomarvel voor meer informatie

Voor meer informatie over Roger microfoons brengt u een bezoek aan www.phonakpro.com/roger

Ga naar www.phonakpro.com/smartapps voor meer informatie

Wat maakt Marvel nog wonderbaarlijker?

In tegenstelling tot andere beschikbare hoortoestellen, kan Phonak Audéo Marvel **rechtstreeks verbinding maken met iOS- of Android-smartphones, of andere telefoons met Bluetooth®-functionaliteit** om zo elk soort audio naar beide oren te streamen. Uw cliënten kunnen genieten van handsfree telefoongesprekken via ingebouwde microfoons. Daarnaast kan er worden ingesteld dat hoorbare telefoonsignalen ook via de Marvel-hoortoestellen worden afgespeeld. Marvel biedt stereo-geluidskwaliteit voor het streamen van muziek, video's, e-books, podcasts en veel meer.



Phonak Audéo Marvel beschikt ook over bedrijfseigen AirStream™ Technology **voor de best beoordeelde geluidskwaliteit bij het streamen vanaf een tv of stereosysteem⁵**. Uw cliënten kunnen genieten van tv-programma's en films met behulp van de Phonak TV Connector: een eenvoudige plug-and-play oplossing. Het lijkt op het gebruik van draadloze hoofdtelefoons, maar is misschien nog wel beter omdat de Marvel-hoortoestellen nu onderscheid maken tussen gestreamde spraak- en muzieksignalen en zichzelf automatisch aanpassen voor een optimale geluidskwaliteit.

Belangrijkste kenmerken:

- Verbinding met smartphones - iOS en Android
- Verbinding met veel dagelijks gebruikte elektronica
- Hoortoestellen die gebruikt worden als draadloze stereohoofdtelefoons
- Extra lange streamingtijd dankzij AirStream™ Technology

Roger™ microfoons verbeteren hoorprestaties in veel lawaai en over afstand. Phonak Audéo Marvel beschikt over RogerDirect™, waarmee Roger technologie rechtstreeks naar Marvel-hoortoestellen kan streamen zonder dat er een externe ontvanger bevestigd hoeft te worden.

Belangrijkste kenmerken:

- Marvel en Roger: de optimale oplossing voor uitdagende luistersituaties
- Ontworpen om spraakverstaan te verbeteren in veel lawaai en over afstand
- Discrete en aantrekkelijke oplossingen


Apps-oloot fantastisch!

Het nieuwe digitale serviceplatform van Phonak is bedoeld om beter in de persoonlijke luisterbehoeften van de cliënten te kunnen voorzien. Via de myPhonak app kunnen cliënten kiezen om informatie met u te delen, waardoor u in realtime hun luisterervaring kunt aanpassen.

Belangrijkste kenmerken:

- Realtime ondersteuning op afstand via video
- Gepersonaliseerde hoorervaring

Telefoongesprekken kunnen lastig zijn, zeker bij achtergrondlawaai. Met de myCall-to-Tekst app van Phonak kunnen uw cliënten het gesprek horen via hun Marvel™-hoortoestellen en in realtime lezen wat de persoon aan de andere kant van de lijn zegt. Probeer de gratis proefversie uit.

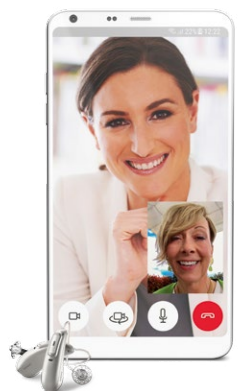

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonakpro.com