

OTICON | Geno

Geniet van het **geweldige geluid** van het leven



Kwaliteitsgeluid
eenvoudig
gemaakt

oticon
life-changing technology

Maak kennis met **Oticon Geno**

Een nieuwe lijn geavanceerde producten in de basiscategorie



Geweldige hoorprestaties, gemakkelijk toegankelijk

Oticon Geno is gebaseerd op onze geavanceerde quad-core signaalverwerkingschip en combineert een geweldige geluidskwaliteit met automatische functies en een laag stroomverbruik. De nieuwe Oticon Geno is de ideale basiskeuze voor een beter gehoor, dankzij:

- Bewezen hoortechnologie
- Breed scala aan discrete en krachtige uitvoeringen
- Meerdere aanpasopties
- Uitgebreid connectiviteitssysteem met Streamer Pro

Een product van de pioniers van BrainHearing™

Bij Oticon gaat onze benadering van het gehoor veel verder dan alleen het versterken van geluid. Dit komt omdat "horen" in de hersenen gebeurt. Dat is de reden dat hoortoestellen van Oticon gericht zijn op het leveren van wat de hersenen nodig hebben om gezond te zijn. We noemen dit BrainHearing™.




Een comfortabele hoorervaring

Automatische hoortechnologie met krachtige functies

De automatische technologie in de kleine Oticon Geno hoortoestellen ondersteunt uw cliënten actief door een natuurlijkere en comfortabelere hoorervaring te creëren.

Oticon Geno heeft een indrukwekkende **bandbreedte van 8 kHz en 15 frequentiekanalen** voor een goede geluidskwaliteit. **Free Focus** biedt vier directionaliteitsstanden, waarmee uw cliënten kunnen kiezen waarop ze hun gehoor willen focussen. Dit helpt het verstaan van spraak te verbeteren, vooral in lawaaiige omgevingen.

Geno feedback shield gebruikt geluid in tegenfase en frequentieverschuiving om incidenten van vervelend fluiten en feedback voor de drager radicaal te verminderen.

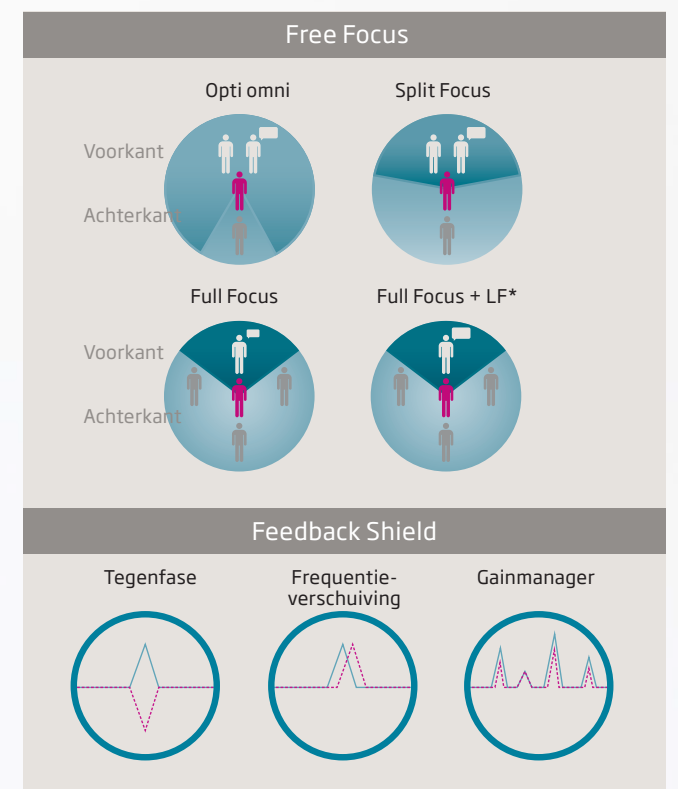

* LF = Lage Frequentie



Oticon ConnectLine™ - **de alles-in-één** geïntegreerde oplossing



Eenvoudige en persoonlijke aanpasopties

Help uw cliënten te genieten van de hoorervaring die ze willen

Zelfs als ons basisproduct biedt de nieuwe Oticon Geno productfamilie u tal van manieren om de hoortoestellen af te stemmen op de voorkeuren van uw cliënt. Alles wordt gedaan via de bekende Genie aanpasssoftware die gebruik maakt van de bestaande FittingLink 2.0 voor draadloze programmering.

De **YouMatic** functie heeft drie vooraf gedefinieerde hoorprofielen met zeven stappen voor personalisatie, waarmee u de hoortoestellen kunt aanpassen aan de manier waarop uw cliënten het liefst horen.



Oticon Geno bevat ook vier optionele vooraf geconfigureerde **specifieke programma's** om extra ondersteuning te bieden in moeilijke luistersituaties.

Specifieke programma's


- 1 Muziek:** behoudt de dynamiek om de kwaliteit van de muziekweergave te maximaliseren
- 2 Comfort:** helpt hoge niveaus van omgevingsgeluid en stressvolle situaties te overwinnen
- 3 Grote groepen:** verbetert de luisterfocus voor gesprekken in rumoerige situaties
- 4 Presentatie:** ontwikkeld om de drager te helpen een presentator makkelijker te verstaan

Haal het meeste uit Oticon Geno hoortoestellen

ConnectLine maakt alles mogelijk: het streamen van telefoongesprekken, het genieten van één-op-één communicatie, het kijken naar de tv zonder anderen te storen, het luisteren naar muziek, het voeren van videogesprekken en nog veel meer.

ConnectLine maakt gebruik van draadloze technologie om streaming van hoge kwaliteit te garanderen. De eenvoudige en intuïtieve Streamer Pro maakt naadloos verbinding met een breed scala aan apparaten en kan eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van uw cliënten.

ConnectLine App is geoptimaliseerd voor iPhone® en Android™-apparaten en de app kan gratis worden gedownload bij de App Store® en Google Play™.

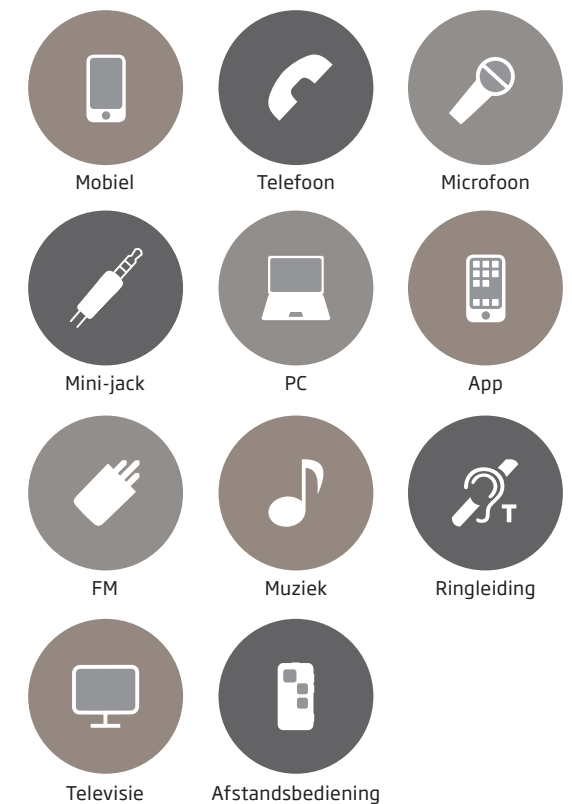

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Oticon Geno – discretie en luistercomfort


Stijlvol en krachtig

Van de kleine CIC-modellen tot de immer populaire miniRITE en krachtige BTE PP, de Oticon Geno familie heeft veel te bieden aan uw cliënten. Oticon Geno bevat zelfs ons Power FlexMould 105 luidsprekersysteem, dat zowel voor RITE als voor miniRITE beschikbaar is.

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar in natuurlijke kleuren die passen bij de huid of het haar en zijn verkrijgbaar op twee prijsniveaus: **Geno 1** en **Geno 2**.



ITE toestelkleuren

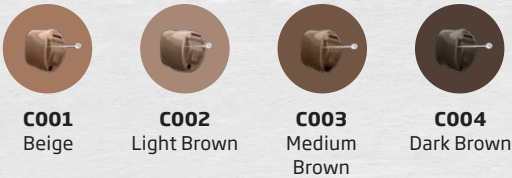

RITE en BTE toestelkleuren



Voordelen	Eigenschappen	Oticon Geno 1	Oticon Geno 2
Het verstaan van spraak	Free Focus	4 standen	3 standen
	Automatische regelaars	Tri mode	Dual mode
	Back dir*	●	
Geluidskwaliteit	Aanpasbandbreedte	8 kHz	8 kHz
	Frequentiekanalen	15	15
Luistercomfort	Single compression	●	●
	Binaurale coördinatie	●	●
	Geno feedback shield	●	●
	Lawaaimanagement	Modulatie	Modulatie
Personalisatie en optimale aanpassing	YouMatic	3 profielen, 7 personalisatiestappen	3 profielen, 3 personalisatiestappen
	Adaptatiemanagement	Automatisch en handmatig	Automatisch en handmatig
	Specifieke programma's	4	4
	Aanpasbanden	6	6
	Aanpasmethoden	NAL-NL1+2, DSL v5.0	NAL-NL1+2, DSL v5.0
Connectiviteit en accessoires	ConnectLine**	Connect [+]	●
	ConnectLine App	●	●
	DAI/FM	●	●

* Beschikbaar met de ConnectLine App
** ConnectLine is niet beschikbaar met CIC



RITE en BTE miniFit oorstukjes



