

ACCESSOIRES

- Accessoires van Widex Moment en Coselgi zijn uitwisselbaar
- Via Bluetooth
- Via Widex-Link
 - techniek ontwikkeld door Widex
 - snel en stabiel
 - nauwelijks vertraging
 - grote bandbreedte
 - laag stroomverbruik
 - nauwelijks straling



ACCESSOIRES



COM-DEX



RC-DEX



PHONE-DEX 2



SOUND ASSIST



TV PLAY



TV-DEX



FM+DEX



SOUND CONNECT

ACCESSOIRES

- RC-DEX
- COM-DEX
- TV-DEX
- TV-DEX Converter
- TV PLAY
- PHONE-DEX II
- FM+DEX
- Sound Assist
- Sound Connect

WIDEX SOUND ASSIST



- Widex Moment Direct streaming hoortoestellen
- Multifunctionele accessoire
- Vereenvoudigen van communicatie



WIDEX

WIDEX SOUND ASSIST

- Partnermicrofoon-functie
- Tafelmicrofoon-functie
- Handsfree bellen
- Streamen vanaf Bluetooth-apparaten
- Afstandsbediening voor hoortoestellen
- Luisterspoel



WIDEX SOUND ASSIST COMPACT EN DISCREET




Widex Sound Assist



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Compatibel met 2.4 GHz hoortoestellen
- Verbeterde spraakverstaanbaarheid in lastige luistersituaties
- Partnermicrofoon/tafelmicrofoon voor partner/metgezel/ in rumoerige omgevingen
- Handsfree bellen en audio via de smartphone
- Streamen van audio via de smartphone
- Ondersteuning van Voice Assistant
- Afstandsbediening voor hoortoestel (programma en volume)
- Luisterspoel
- Geïntegreerde clip
- Elegant en onopvallend ontwerp

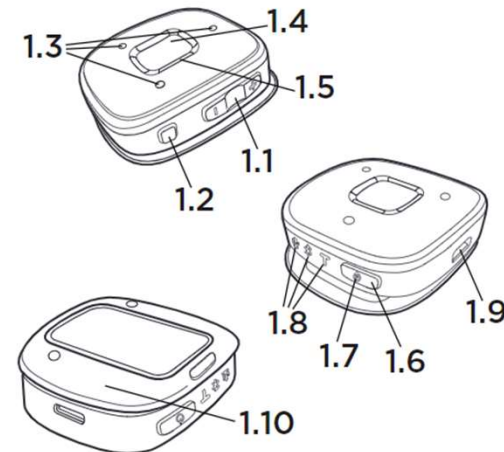

- 1.1. Volumetoetsen (+/-)
- 1.2. Programmatoets
- 1.3. Microfoons
- 1.4. Druktoets
- 1.5. Indicatielampjes
- 1.6. Power-/modustoets
- 1.7. Indicatielampje batterij
- 1.8. Indicatielampjes modus
- 1.9. Micro-USB-poort
- 1.10. Geïntegreerde metalen clip voor bevestiging/stabiliteit op een tafelblad

ALLEEN MET DIRECT STREAMERS!
(Bluetooth)

WIDEX RC-DEX

(REMOTE CONTROL DEX)

WIDEX RC-DEX AFSTANDBEDIENING




BELANGRIJKSTE FEATURES

- Programmawisseling
- Volumeregelaar
- Schakelaar voor vergrendeling toetsen
- LED zendindicatie
- Batterij kan door gebruiker vervangen worden
- Gebruiksduur batterij ong. 12 maanden
- Kan aan sleutelring bevestigd worden
- Verkrijgbaar in zilver of zwart

OVERZICHT

1. LED
2. Schakelaar voor vergrendeling
3. Volume hoger
4. Programmawisseling
5. Volume lager

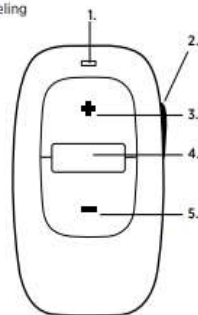

1. Batterijdeksel
2. Oogje voor sleutelhanger/bevestigingskoordje



WIDEX

WIDEX COM-DEX

DRAADLOZE STREAMER




BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Hands-free bellen met Bluetooth-telefoons
- Muziek streamen vanaf Bluetooth-telefoons
- Smartphone met App als afstandsbediening
- Hoortoestellen kunnen worden gebruikt als headset/hands-free set
- Draadloos audio streamen naar de hoortoestellen met WidexLink
- Room off-functie
- Streamen start automatisch
- Constant streamen tot wel 8 uur/8 dagen stand-by*
- Batterij opladen in 3 uur
- Stijlvolle kleuren
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

OVERZICHT

1. Drukknop/beantwoordknop
2. Room off-knop
3. Neklus
4. Microfoon
5. LED
6. Oplaadconnector / MICRO USB
7. Aan- uitschakelen door neklus te sluiten/openen

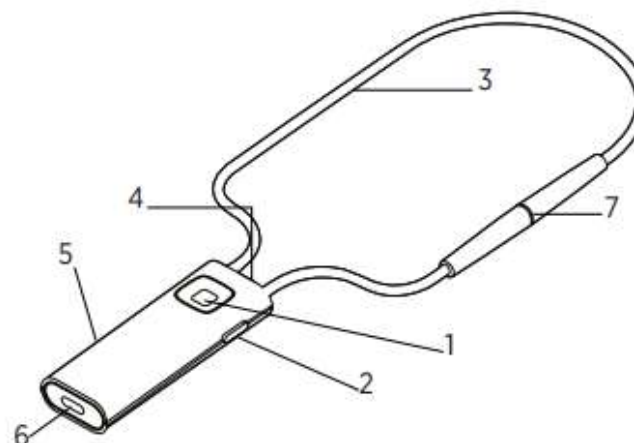

TV-DEX



- Draadloze audiostreaming van TV en andere audiobronnen
- Hoge geluidskwaliteit door WidexLink
- Room off functie
- Gebruiksduur accu 10 uur
- Oplaadbaar



HET AANSLUITEN VAN EEN WIDEX TV-DEX OP EEN TV MET DIGITALE AUDIO OUTPUT

Aansluitdiagram
(de nummers verwijzen naar de vijf bovenstaande stappen)



Betekenis:

1. Constant groen: Zenden actief
2. Veranderend van groen naar rood: Zenden uit
3. Constant rood: Room off ingeschakeld
4. Knipperend rood en groen: Opladen van accu

ACCESSORIES

Mini USB power supply 5 V DC / 500 mA



Adjustable lanyard

3.5 mm TRS jack to 3.5 mm TRS jack cable

3.5 mm jack TRS to phono cable

SCART adapter

1. Transmission on/off
2. Volume up
3. Volume down
4. Room Off

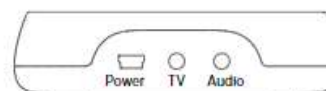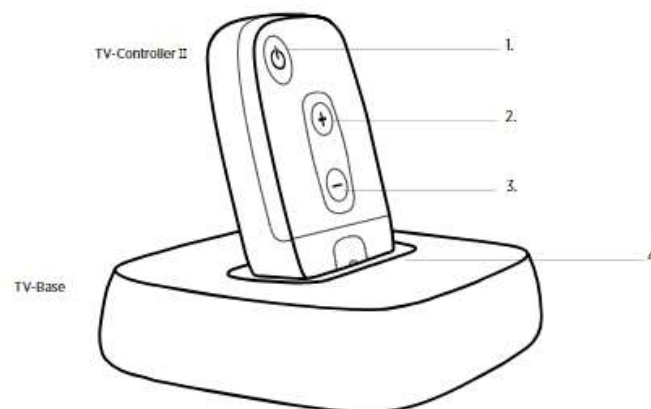



WIDEX

WIDEX TV PLAY™





BELANGRIJKSTE FEATURES

- 2.4GHz direct audio streaming van TV naar compatibele hoortoestellen
- Dual antenna technology met maximale streamingsstabiliteit; patent aangevraagd
- Opties: optische (Toslink) input of analoge input
- Schakelen tussen stereo of mono audiomodus
- Stroomvoorziening via Micro USB-ingang
- Gebruiksvriendelijk regelen via ondersteunende hoortoestel-app
- Elegant en onopvallend design

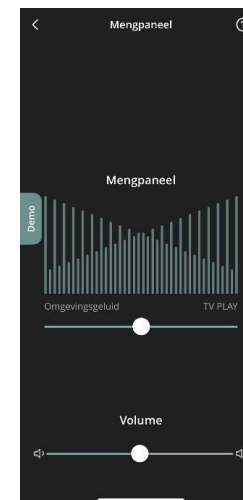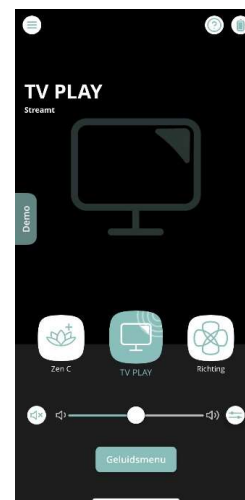

OVERZICHT

1. Micro USB-ingang voor voeding
2. Optisch IN
3. Analooog IN of optisch UIT
4. LED
5. Schakelaar 2 hoortoestellen of 1 hoortoestel (stereo- of monomodus)
6. Instelknop

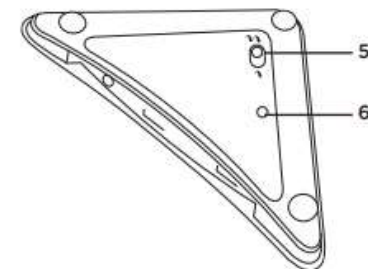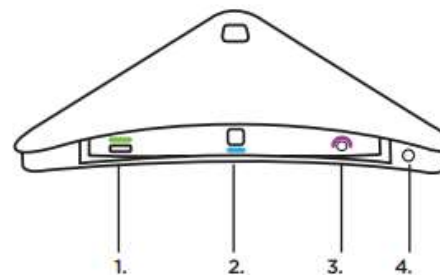


ALLEEN MET DIRECT STREAMERS!
(Bluetooth)

WIDEX

WIDEX PHONE-DEX II

- DECT-telefoon voor hoortoestelgebruikers, maar ook zonder hoortoestel te gebruiken.
- Streamt het geluid naar beide hoortoestellen rekening houdend met het gehoorverlies.
- Grote toetsen en duidelijk beeldscherm voor eenvoudig gebruik.
- Gigaset E560A model
- Voor alle modellen vanaf Widex EVOKE en Coselgi Effect (m.u.v. CIC-M)

Handset

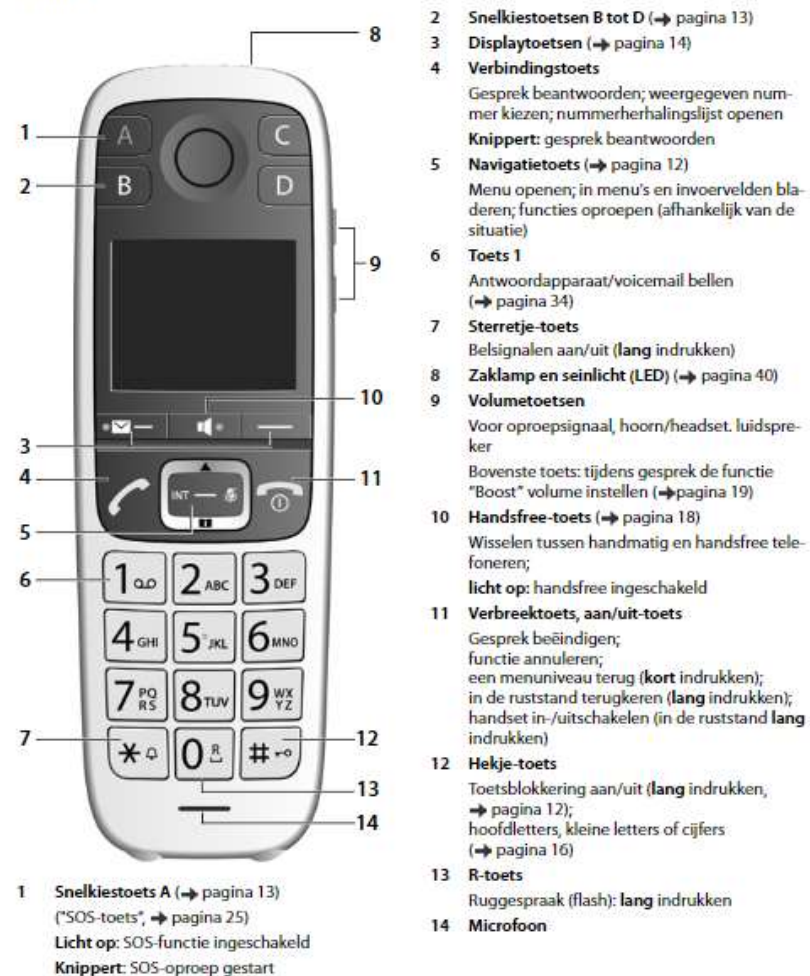

FM+DEX



- Flexibel apparaat voor FM streaming
- Klein en gebruiksvriendelijk
- FM, luisterspoel, audio line-in
- Eén knop voor verschillende functies
- Accu 10 uur

BEREIK


Van FM+DEX naar hoortoestellen	Tot 40 cm
Van FM-Zender naar FM+DEX	Tot 30 meter

Indicator batterijspanning

Batterij bijna leeg	rood
accu opladen	oranje
Batterij volledig opgeladen, oplader nog aangesloten	groen

FM+DEX OVERZICHT

1. Aan/uit
2. Keuzetoets input/Room off
3. Volume hoger/lager
4. LED FM-input
5. LED Audio Input
6. LED luisterspoel
7. Indicator batterijspanning
8. Vergrendeling
9. FM-schakelaar
10. FM-connector (europlug)
11. FM-connector (SCOLA FLEX-ontvanger)
12. Opladen (mini USB-ingang)
13. Audio (lijningang)
14. Deksel

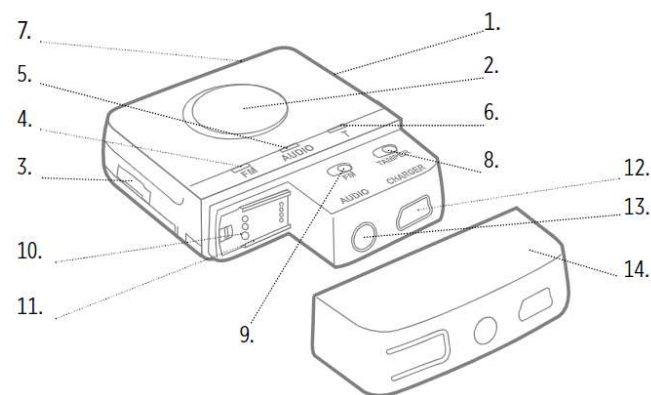

WIDEX


Widex SoundConnect



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Compatibel met 2,4 GHz hoortoestellen
- Streamt audiosignaal direct vanaf een computer naar de hoortoestellen

1.1 Druktoets
1.2 LED

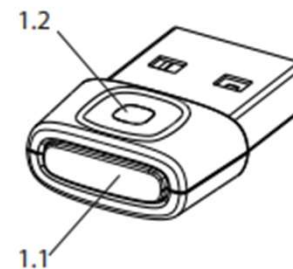

ALLEEN MET DIRECT STREAMERS!
(Bluetooth)

KOPPELEN DEX ACCESSOIRES

(ZORG ERVOOR DAT WANNEER ER EEN KOPPELING GEMAAKT WORDT, ALTIJD DE BATTERIJLADES EERST OPEN EN DICHT GEDAAN WORDEN VOOR MINIMAAL 3 SEC. (KOPPELMODUS))

OF

HERSTART DE OPLAADBARE TOESTELLEN DOOR ZE 5 SECONDEN IN DE LADER TE ZETTEN EN ER UIT TE HALEN.

- RC-DEX → + en - knop 5 sec ingedrukt houden onder de kin (tot er een gong in de hoortoestellen klinkt).
- COM-DEX → Sluit het koord van de COM-DEX (led gaat rood/blauw knipperen), zoek hierna de COM-DEX in het Bluetooth-menu op de telefoon.
- TV-DEX → houdt de + en - knop 5 sec onder de kin ingedrukt (tot er een gong in de hoortoestellen klinkt)
- TV-PLAY → herstart de hoortoestellen, houdt deze hierna boven de TV-PLAY en de koppeling wordt tot stand gebracht. (zorg dat er een audiosignaal is naar de TV-PLAY)
- PHONE-DEX II → toestel bij het oor houden en schakelt direct over naar HT
- FM+DEX → Zorg dat de DEX binnen bereik van HT is en dat het juiste bron is gekozen.
- Sound Assist → Vanuit uit stand de powerknop en +knop 3 seconden ingedrukt houden. Daarna toestellen activeren
- Sound Connect → Toestellen herstarten en knop op dongle 3 seconden ingedrukt houden.